

Inhibit Adapter

Installation Instructions

EN

1. Remove the cover from the AEM® Monitor.
2. Cut the inhibit adapter cable at the strain relief on the inside of the unit next to the sheet metal and pull the inhibit adapter cable out from the front.
3. Disconnect the white locking connector that attaches the inhibit adapter cable to the ESM Main board.
4. Mark the color of the wire from the inhibit adapter onto the locking connector.
5. With a knife or small screwdriver, push the metal part of the contacts down on the white connector. Push the contact down and toward the wire. Pull the wire after pushing the contact back. The contact should pull out of the white connector.

NOTE

- Look at the metal contact while removing – the correct orientation of the contact is needed to place the new one.
6. Insert the inhibit adapter cable from the new inhibit adapter through the hole in the front panel. A pair of pliers may be used to pull the cable through. Pull only on the strain relief portion of the cable.

NOTE

- Squeezing and holding the strain relief will compress the material and make it easier to pull through the front panel. The use of alcohol on the strain relief may also help.
7. Insert the metal contacts into the white connector in the correct locations. Gently pull the wires after all of the contacts have been inserted to insure they are locked into position.
 8. Attach the white connector to the PC Board.
 9. Reattach the cover onto the top of the unit.

Verify that the AEM Monitor functions properly per Section 3 of the AEM Monitor Operator/Service Manual.

Perform normal electrical safety tests as required per hospital protocols.

For questions, contact the Encision Service Department.

ENCISION® and AEM® are registered trademarks of ENCISION Inc.

Onderbrekingsadapter

Installatie-instructies

NL

1. Verwijder de behuizing van de AEM®-Monitor.
2. Snij de kabel van de onderbrekingsadapter los bij de trekontlasting aan de binnenkant van de unit naast het plaatmetaal en trek de kabel van de onderbrekingsadapter er door de voorkant uit.
3. Trek de witte klemconnector die de kabel van de onderbrekingsadapter aansluit op het de ESM-hoofdpaneel eruit.
4. Noteer de kleur van de draad van de onderbrekingsadapter naar de klemconnector.
5. Druk het metalen gedeelte van de contactpunten met een mes of kleine schroevendraaier naar beneden op de witte connector. Duw het contactpunt naar beneden en naar de draad toe. Trek aan de draad nadat u het contactpunt terug geduwd heeft. Het contactpunt moet uit de witte connector getrokken worden.

OPMERKING

- Kijk naar het metalen contactpunt bij het verwijderen - u heeft de juiste oriëntatie van het contactpunt nodig voor het plaatsen van de nieuwe.
6. Steek de kabel van de onderbrekingsadapter van de nieuwe adapter door het gat in het voorpaneel. U kunt een pincet gebruiken om de kabel erdoor te trekken. Trek alleen aan de trekontlasting van de kabel.

OPMERKING

- Door de trekontlasting in te drukken en vast te houden wordt het materiaal samengedrukt en wordt het gemakkelijker om het door het voorpaneel te trekken. Ook kan het gebruik van alcohol op de trekontlasting helpen.
7. Steek de metalen contactpunten op de juiste plaats in de witte connector. Trek voorzichtig aan de draden nadat alle contactpunten in de connector gestoken zijn om te waarborgen dat ze op hun plaats vastgeklemd zijn.
 8. Sluit de witte connector aan op het PC-paneel.
 9. Bevestig de behuizing opnieuw aan de bovenzijde van de unit.


Controleer aan de hand van hoofdstuk 3 van de Bedienings-/Onderhoudshandleiding van de AEM-Monitor of de AEM-Monitor goed functioneert.

Voer de normale normale testen voor elektrische veiligheid uit zoals vereist volgens de protocollen van de instelling.

Neem contact op met de serviceafdeling van Encision als u vragen heeft.

ENCISION® en AEM® zijn gedeponeerde handelsmerken van ENCISION Inc.

ENCISION®

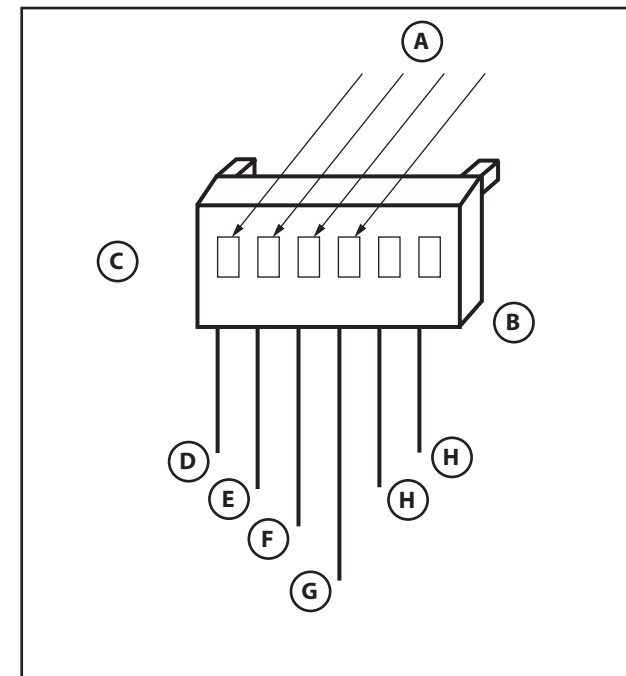

	EN	NL
A	Push here to remove the contact. Push the contact down and toward the wire.	Druk hier om het contactpunt te verwijderen. Druk het contactpunt naar beneden en naar de draad toe.
B	Do not disconnect the white wires.	Maak de witte draden niet los.
C	View of the connector from the bottom.	Aanzicht connector vanaf de onderkant.
D	Black	Zwart
E	Red	Rood
F	Green	Groen
G	Yellow	Geel
H	White	Wit

 ENCISION Inc.
6797 Winchester Circle
Boulder, CO 80301 USA
Ph: 303-444-2600
Fax: 303-444-2693

Printed in USA

© Copyright 2010 Encision Inc.

 ENCISION Inc.
6797 Winchester Circle
Boulder, CO 80301 VS
Tel: +1-303-444-2600
Fax: +1-303-444-2693

Gedrukt in de VS

© Copyright 2010 Encision Inc.